


Carbatom

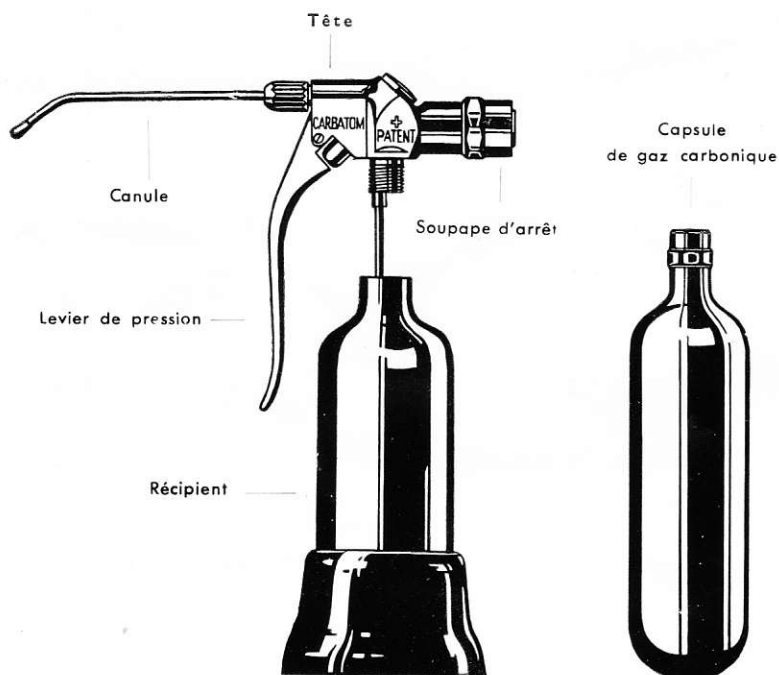

permet de réaliser la DOUCHE CARBO-GAZEUSE

il comprend :

- un PULVÉRISATEUR
- une CAPSULE DE GAZ CARBONIQUE (150 ou 300 gr).
- un VERRE DOSEUR

MODE D'EMPLOI DU CARBATOM

Dévisser la tête du récipient.

Remplir jusqu'au repère le verre doseur avec de l'eau à une température voisine de 50 degrés centigrades, ajouter quelques gouttes d'elixir dentrifice CARBAETHYLE, ou du produit préconisé; verser le mélange dans le récipient.

Remonter la tête du CARBATOM.

Visser sur la soupape d'arrêt la capsule chargée de gaz carbonique en la maintenant en POSITION VERTICALE.

A la rencontre d'une faible résistance lors du vissage, prendre la capsule à pleine main et visser énergiquement jusqu'à ce qu'un léger sifflement se soit fait entendre, décelant la pénétration du gaz carbonique dans le récipient. Compter lentement jusqu'à six (six secondes), dévisser alors la capsule et la mettre de côté. Visser la canule selon l'angle de projection désiré. L'appareil est prêt à l'emploi.

Une pression sur le levier libère le jet énergétique imprégné de gaz carbonique; diriger ce jet sur les régions à traiter :

espaces interdentaires, parties enflammées des gencives, sous les bridges. Une pression plus faible sur le levier diminue la puissance du jet. Bien se gargariser avec cette eau saturée de gaz carbonique.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER :

Pendant l'utilisation, tenir le pulvérisateur vertical.

Conserver les capsules chargées à l'abri de la chaleur. Correctement utilisées, elles permettent, modèle 150 Grs : 25 à 30 charges; modèle 300 Grs CO₂ : 50 à 60 charges

Ne pulvériser que des liquides purs ou filtrés.

RECHARGE DES CAPSULES :

Les capsules vides sont échangées contre des capsules pleines :

PARIS : à domicile, sur demande téléphonique, à nos bureaux, en pharmacie.

PROVINCE : par envoi poste, en pharmacie.

Fabrication Française SERNO sous licence SUISSE



Carbatom

PULVÉRISATEUR-ATOMISEUR CARBONIQUE POUR SOINS DENTAIRES

CARBATOM NETTOIE INTÉGRALEMENT LA CAVITÉ BUCCALE.

Le jet puissant carbo-gazeux du CARBATOM atteint les parties les plus inaccessibles de la cavité buccale : espaces interdentaires, interstices sous les bridges et les appareils orthodontiques : il en **chasse les résidus** alimentaires et les produits de desquamation dont la putréfaction provoque l'inflammation de la gencive.

CARBATOM AGENT PROPHYLACTIQUE ET CURATIF DE LA PARODONTOLYSE (Pyorrhée).

Le CARBATOM est **indispensable pour une bonne hygiène buccale** chez les sujets présentant un certain degré de parodontolyse. Il permet de **traiter les gingivites et les parodontites** superficielles et profondes tant au cabinet du praticien qu'en usage domestique.

Il exerce sur les gencives un **massage** agréable et profitable ; l'absence du massage naturel que procurait à l'homme primitif l'énergique mastication des aliments crus étant une cause de la fragilité des gencives. En outre l'acide carbonique, en sursaturation dans le liquide pulvérisé par le CARBATOM

pénètre dans la circulation, déterminant une **vaso-dilatation** — il stimule ainsi les échanges organiques.

CARBATOM DIMINUE LA FORMATION DU TARTRE.

Le jet du CARBATOM combat la formation du tartre, d'une part en expulsant les matières organiques qui forment le squelette du tartre, d'autre part en s'opposant par son apport d'acide carbonique à la précipitation du tartre.

CARBATOM, BAIN D'ACIDE CARBONIQUE POUR LA BOUCHE.

Le gargarisme avec le liquide permet d'étendre au pharynx l'action bienfaisante de ce bain d'acide carbonique, qui est prophylactique des angines.

CARBATOM PERMET LES SOINS A DOMICILE ET EN VOYAGE.

La douche d'acide carbonique d'un usage courant au cabinet dentaire était d'application difficile à domicile en raison de l'importance des appareils nécessaires à sa réalisation, — le CARBATOM, petit appareil à main, léger, robuste, de fonctionnement sûr et aisé comble aujourd'hui cette lacune.

CARBATOM UTILISÉ SYSTÉMATIQUEMENT SUR LE CONSEIL DE VOTRE DENTISTE :

PRÉVIENDRA LA CARIE,

DIMINUERA LA FORMATION DU TARTRE,

MAINTIENDRA LA SANTÉ DU TISSU GINGIVAL ET LA SOLIDITÉ DE LA DENT

CHAQUE PERSONNE SOUCIEUSE DE SON HYGIÈNE BUCCALE POSSÉDERA CARBATOM