

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BALANCE DE PRÉCISION À FLÉAU

FICHE N° 6749

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

La balance de précision à fléau Prolabo est composée d'un système d'amortissement à huile permettant de stabiliser rapidement les plateaux. La balance possède deux plateaux en équilibre sur une tige principale, le fléau. Pour la pesée, on pose l'échantillon à peser sur le plateau de gauche, on équilibre avec des masses placées sur l'autre plateau. La balance repose sur trois pieds afin d'assurer un équilibrage parfait. Les pieds sont réglables et un niveau à bulle au pied du fléau permet de régler l'horizontalité de l'appareil. La balance a une portée maximale de 200 g avec une sensibilité de 1 mg. Elle possède une boîte de neuf poids allant de 1 à 100 g et des micro-poids de 10 à 500 mg.


Utilisation


La balance sert à peser des produits chimiques ou des solutions pour la recherche ou la réalisation de travaux pratiques et dirigés.







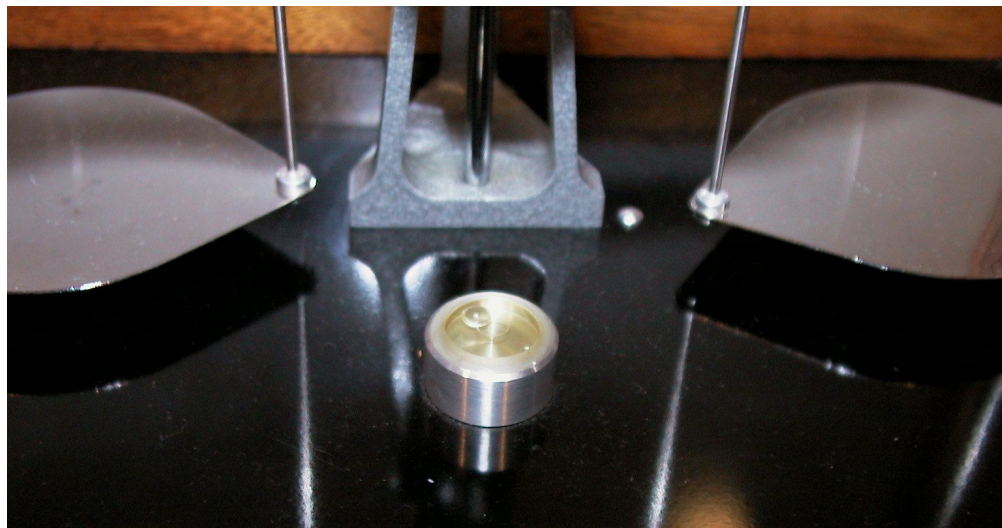

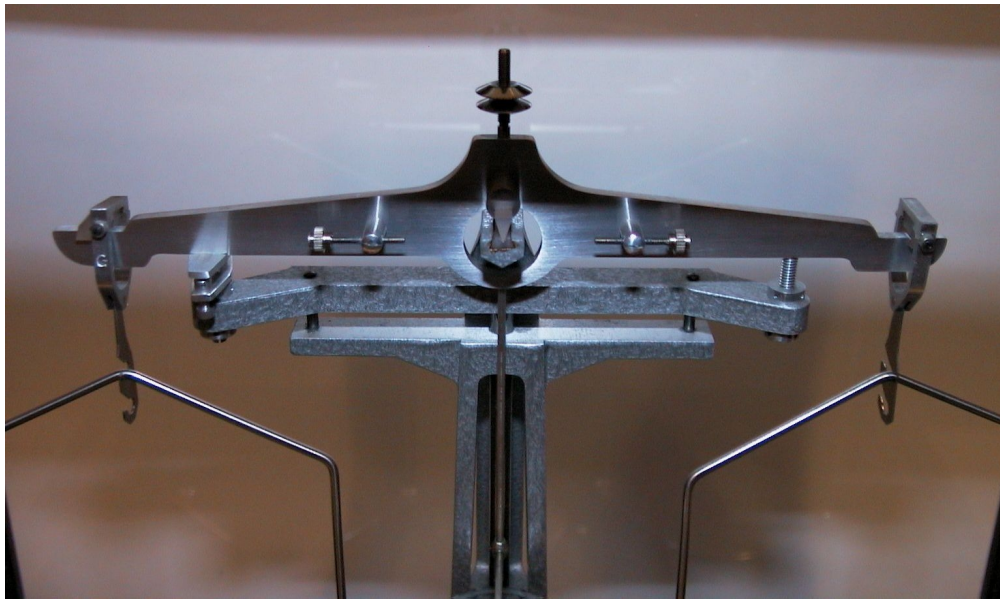

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Balance de précision à fléau (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12958>, consulté le 2026-07-26