

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SCELLEUSE THERMIQUE

FICHE N° 8312

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : TISH - 300


Matériaux :


Description

La scelleuse thermique permet de sceller des sacs en plastique. Elle est constituée d'un bras amovible qui sera appliqué sur un rail métallique recouvert en partie par un tissu. Il y a une diode devant ainsi qu'une molette.

Utilisation

Les cultures anaérobies sont disposées dans un sac en plastique qu'on va sceller en disposant à l'intérieur du sac une barquette contenant un sel dessiccateur ainsi qu'un papier spécifique indicateur de couleur bleu qui devient blanc lorsqu'il n'y a plus d'oxygène. Ce système permet de créer une anaérobiose et empêche les échanges avec l'extérieur.

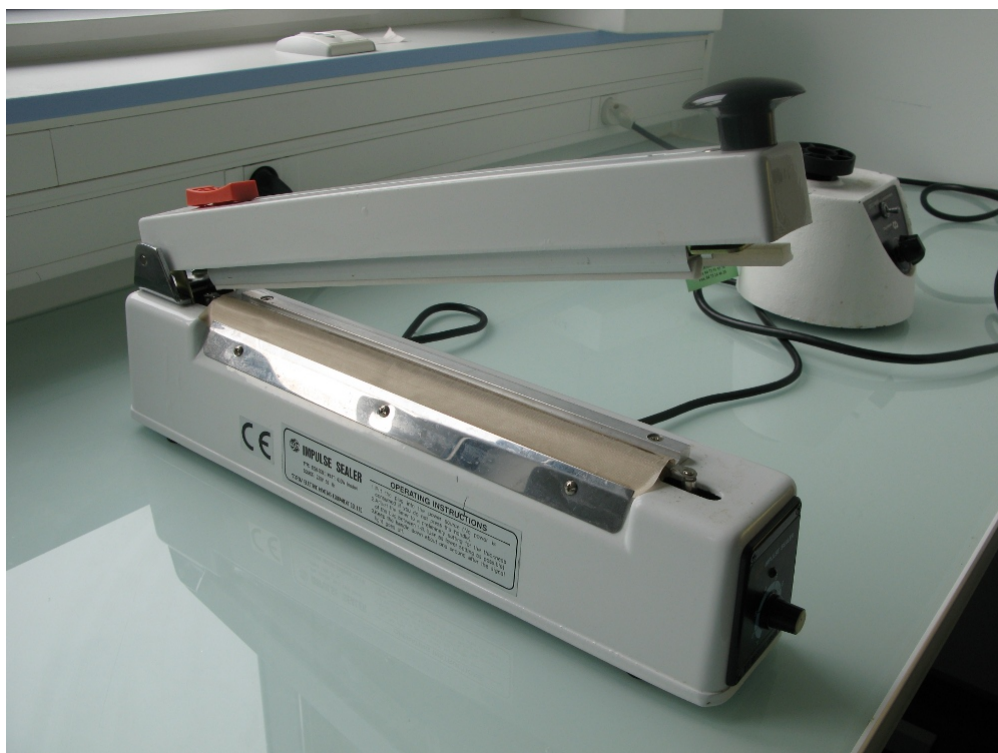

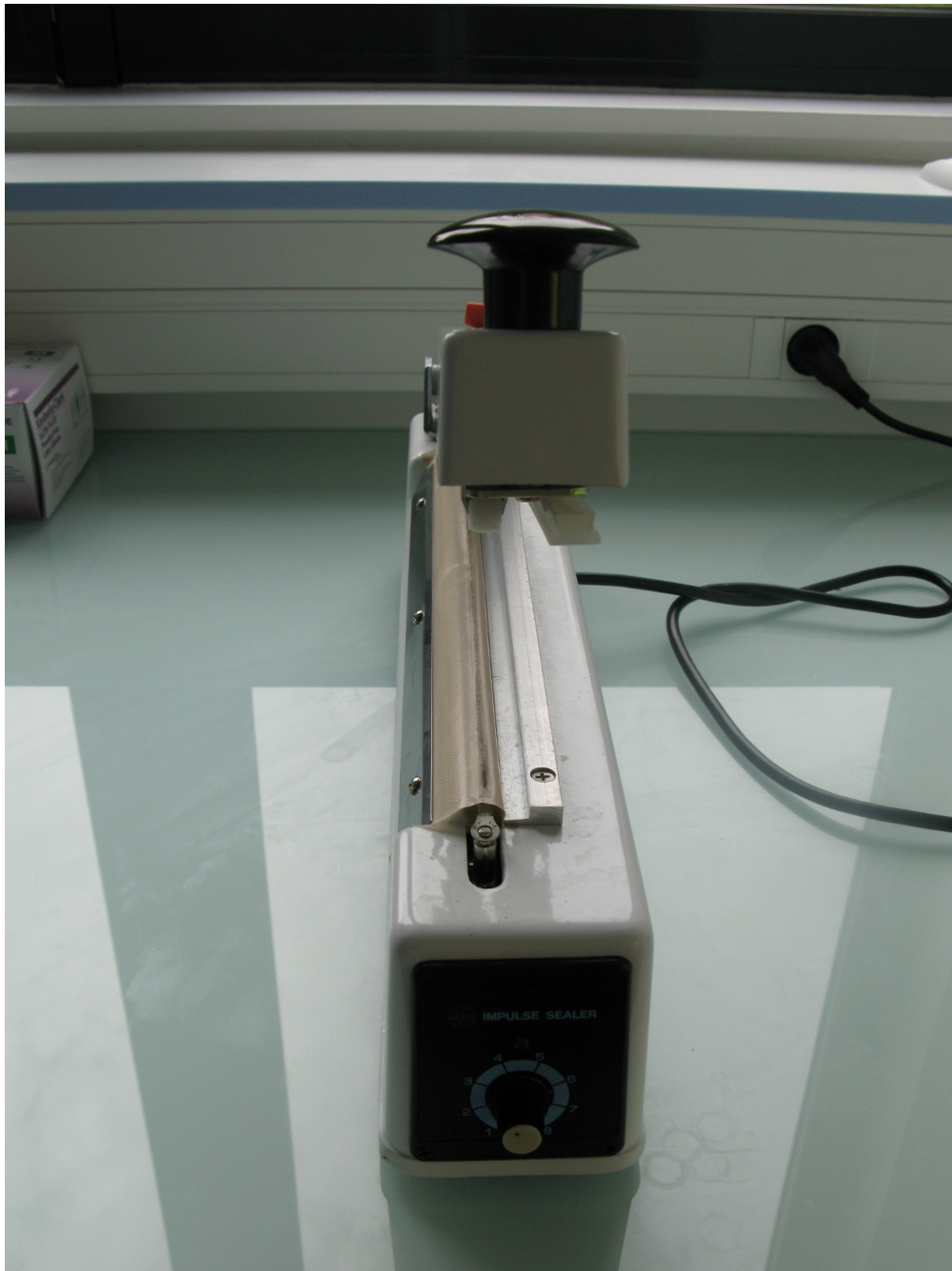

No.R0060416



IMPULSE SEALER

TYPE: TISH-300 WATT: 430W (Impulse)
SOURCE: 230V 50 Hz

TEW ELECTRIC HEATING EQUIPMENT CO., LTD.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1.Put the plug into the power source (No power is consumed if you do not press the handle).
- 2.Adjust the timer to a preliminary setting for the thickness of the bag between 1-8. (Use as lower setting as possible)
- 3.Keep the handle down about one second after the signal light goes off.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Scelleuse thermique (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13370>, consulté le 2026-07-26