

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BAIN-MARIE AGITÉ JP SELECTA 320 OR

FICHE N° 11015

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : JP Selecta

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : 320 OR

Matériaux :

Description

L'appareil est composé d'un grand bac métallique contenant de l'eau qui va être maintenue à température souhaitée. Une manette permet de soulever le couvercle et de disposer les échantillons à l'intérieur. La plateforme accueillant les échantillons est munie de ressorts, ce qui permettra leur maintien lors de l'agitation.

Le boîtier de commande est situé à droite et se compose de deux parties, une destinée à la commande de la température et l'autre à la commande de l'agitation.

Utilisation

L'eau est chauffée et l'échantillon est immergé dedans.

Cet appareil peut être utilisé pour garder les milieux de culture en surfusion (c'est-à-dire liquide), à 48,5°C pour les milieux liquides. Il permet également de faire fondre les milieux gélosés à 100°C.

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique lors des travaux pratiques de microbiologie.







HEATER

ALARM 

 °C

ON



MOTOR

 U/min.


ON



SPEED



UNITRONIC 320 OR

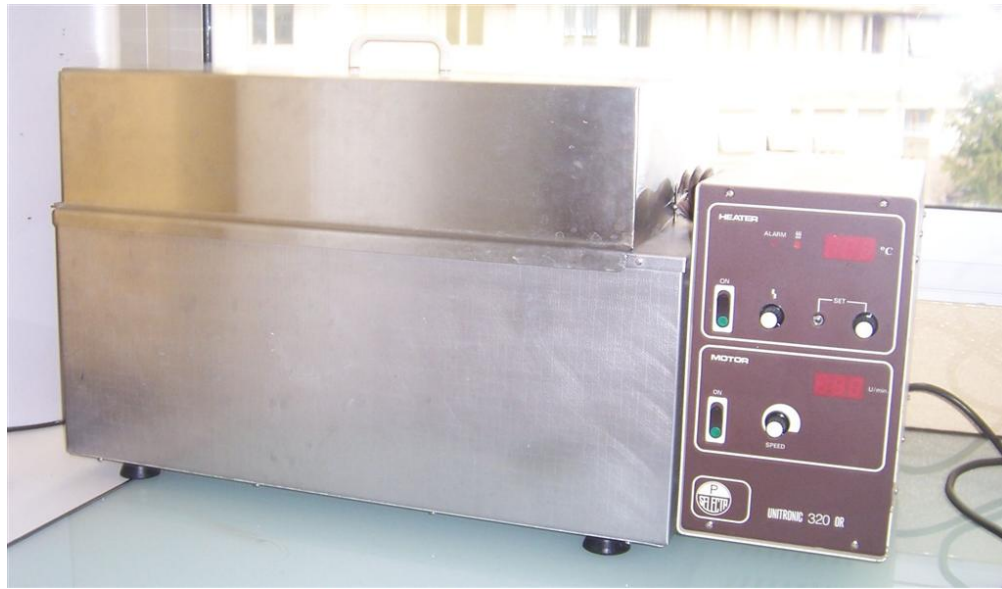

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain-marie agité JP Selecta 320 OR (JP Selecta), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14423>, consulté le 2026-07-27