

CALCIMÈTRE BERNARD

FICHE N° 11046

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : JEULIN

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description


Sur un statif métallique sont fixées une burette graduée de 0,5 en 0,5 d'une contenance de 100 ml, une ampoule de 100 ml et un flacon. L'ensemble est relié par des tubes en caoutchouc souple.


Utilisation

Le calcimètre Bernard permet la mesure de la masse de calcaire contenue dans un échantillon.

Cette donnée est obtenue en mesurant le dioxyde de carbone produit par action de l'acide chlorhydrique sur une masse de terre connue.

Il est utilisé par les élèves lors des travaux pratiques de pédologie.

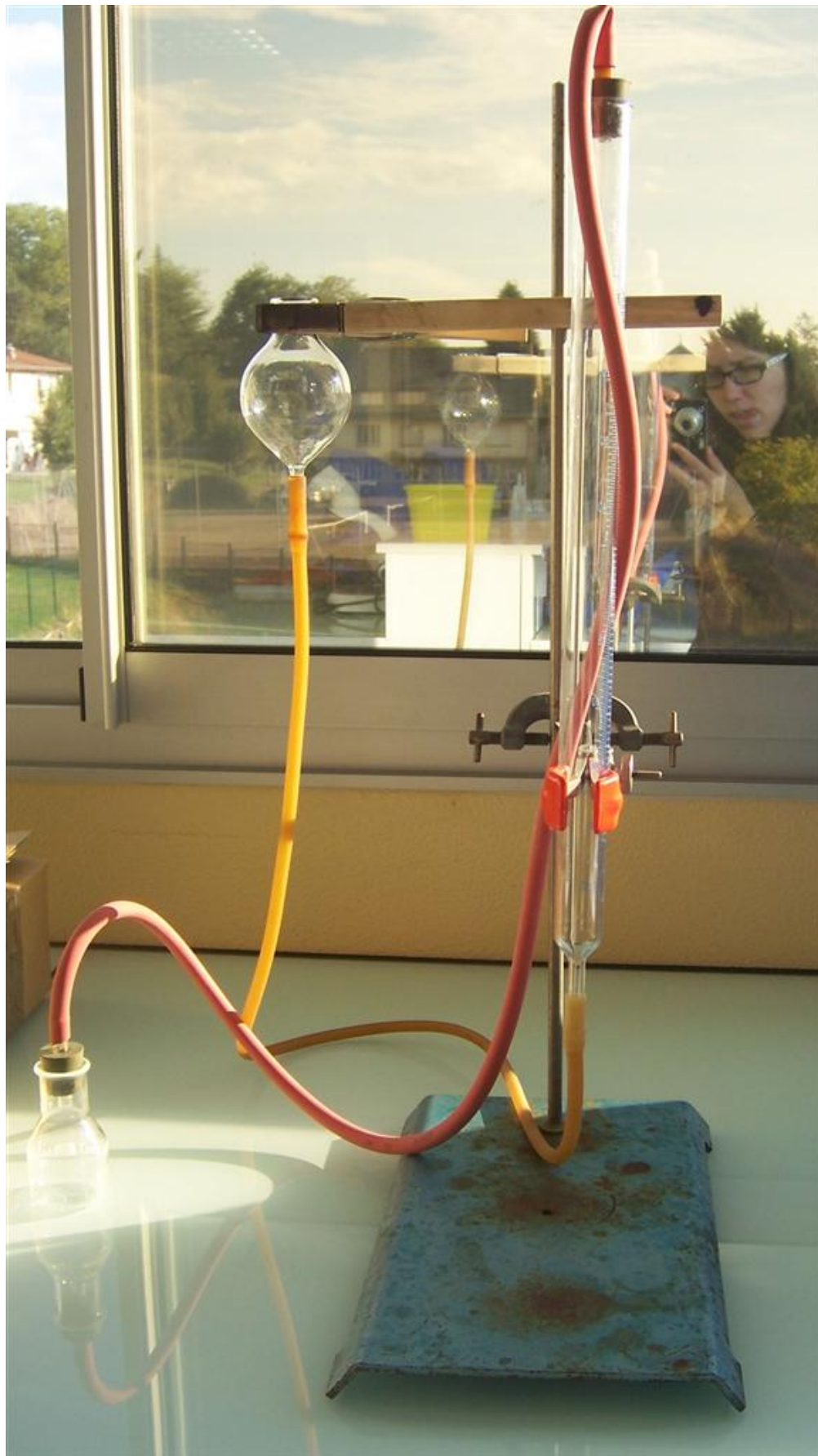

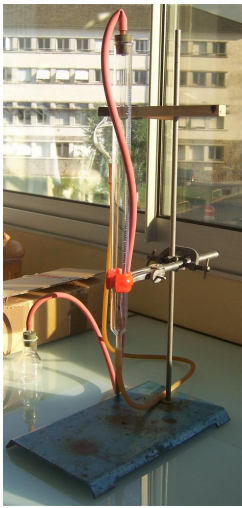





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Calcimètre Bernard (JEULIN),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14451>, consulté le 2026-07-27