

PISTON BURETTE

FICHE N° 445

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Metrohm ; METROHM

Domaines : Biologie, Chimie

Sous-domaines : Chimie analytique

Organisme : Fédération des Sciences Chimiques de Marseille

Ville : Marseille

Modèle : E 274

Matériaux :

Description




La burette à piston E 274 fabriqué par Metrohm est un instrument permettant d'introduire un réactif dans une burette de manière précise pour les dosages. L'objet est composé d'un boîtier et d'un socle métallique. Un tube en Y (manquant) était placé sur le piston de la partie supérieure, avec une entrée pour le réactif, une sortie pour la burette et un réservoir. Le dosage se faisait précisément avec la molette de volume placée sur la face avant.

Utilisation

L'objet se trouve dans une salle du laboratoire, il est utilisé pour l'enseignement.






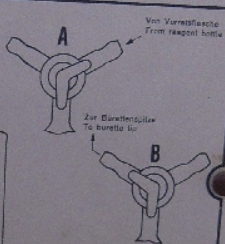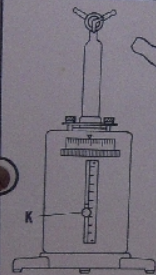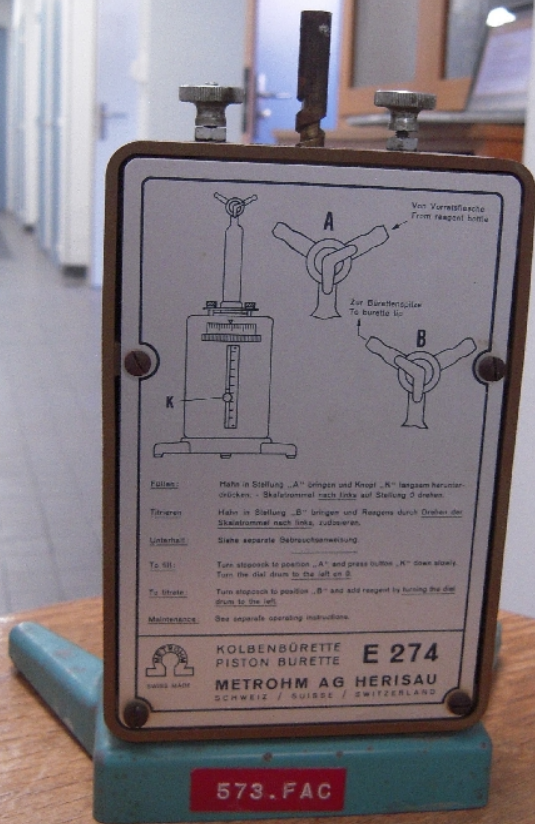

Von Vorratsflasche
From reagent bottle

Zur Erweiterung
To burette tip

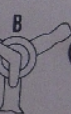

Füllen: Hebe in Stellung „A“ Ringen und Kegel „K“ langsam herunter-
drücken. - Release until next stop on Stellung 2 drehen.

Titreren: Hebe in Stellung „B“ bringen und Reagenz durch Drehen der
Skalatrömmel nach links, zuführen.

Unterhalt: Siehe separate Gebrauchsanweisung.

To fill: Turn stopcock to position „A“ and press button „K“ down slowly.
Turn the dial down to the left on 2.

To titrate: Turn stopcock to position „B“ and add reagent by turning the dial
down to the left.

Maintenance: See separate operating instructions.



KOLBENBÜRETTE E 274
PISTON BURETTE
METROHM AG HERISAU
SCHWEIZ / SUISSE / SWITZERLAND



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Piston burette (Metrohm ; METROHM), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24590>, consulté le 2026-07-28