

POMPE À VIDE À PALETTES

FICHE N° 30886

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : Compagnie Générale de radiologie
Domaines : Chimie
Sous-domaines : Chimie organique
Organisme : Université Catholique de l'Ouest
Ville : ANGERS Cedex 01
Modèle : A2 Type 32
Matériaux : Acier, Composants électriques


Description


La pompe à palettes A2 type 32 de la CGR est constituée d'une chambre circulaire à l'intérieur de laquelle tourne un cylindre excentré constamment tangent au cylindre. Le cylindre, fendu selon le diamètre, porte deux palettes, comprimant un ressort central, qui peuvent coulisser dans la fente. Ce dispositif à pour but de maintenir les extrémités des palettes au contact de la paroi de la chambre lorsque tourne le cylindre. A proximité du point de contact avec la chambre se trouvent deux orifices, l'un pour l'aspiration, l'autre pour l'échappement. Lors de la rotation du cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre, la palette proche de l'orifice d'aspiration se déploie en créant une dépression qui aspire l'air de l'appareil dans lequel il faut faire le vide. L'air contenu dans la pompe va être comprimé puis évacué par l'échappement. L'étanchéité est assurée par l'huile contenue dans la chambre. Le cylindre, solidaire d'un volant d'entraînement, est mis en rotation à l'aide d'un moteur électrique extérieur au moyen d'une courroie de transmission. De telles pompes permettent d'obtenir un vide qui peut être inférieur à 1 mm de mercure (1 torr). Le vide qu'il est possible d'atteindre dépend de la qualité de l'huile et de sa tension de vapeur. Pour éviter que des solvants volatils s'y dissolvent, la pompe est montée sur un groupe de pompage, charriot à roulettes, comportant des pièges pour arrêter les différents composés susceptibles de nuire à son bon fonctionnement: un tube contenant de la potasse en paillettes pour arrêter les traces d'acide, un tube qui sera plongé dans un mélange à très basse température, contenu dans un vase de dewar, pour condenser les fractions volatiles. Pour mesurer la pression atteinte, le groupe de pompage comportera aussi un manomètre à mercure (voir fiches PATSTEC 30876 à 30880) ou un vacustat (jauge de Mac Leod, voir fichier PATSTEC 30882). L'ensemble peut être facilement déplacé pour l'amener à proximité de l'appareil à distiller sous pression réduite.

Utilisation

La pompe à palette CGR a été utilisée pour des distillations sous pression réduite dans le laboratoire de recherche de chimie de la Faculté des Sciences de l'Université Catholique à Angers.




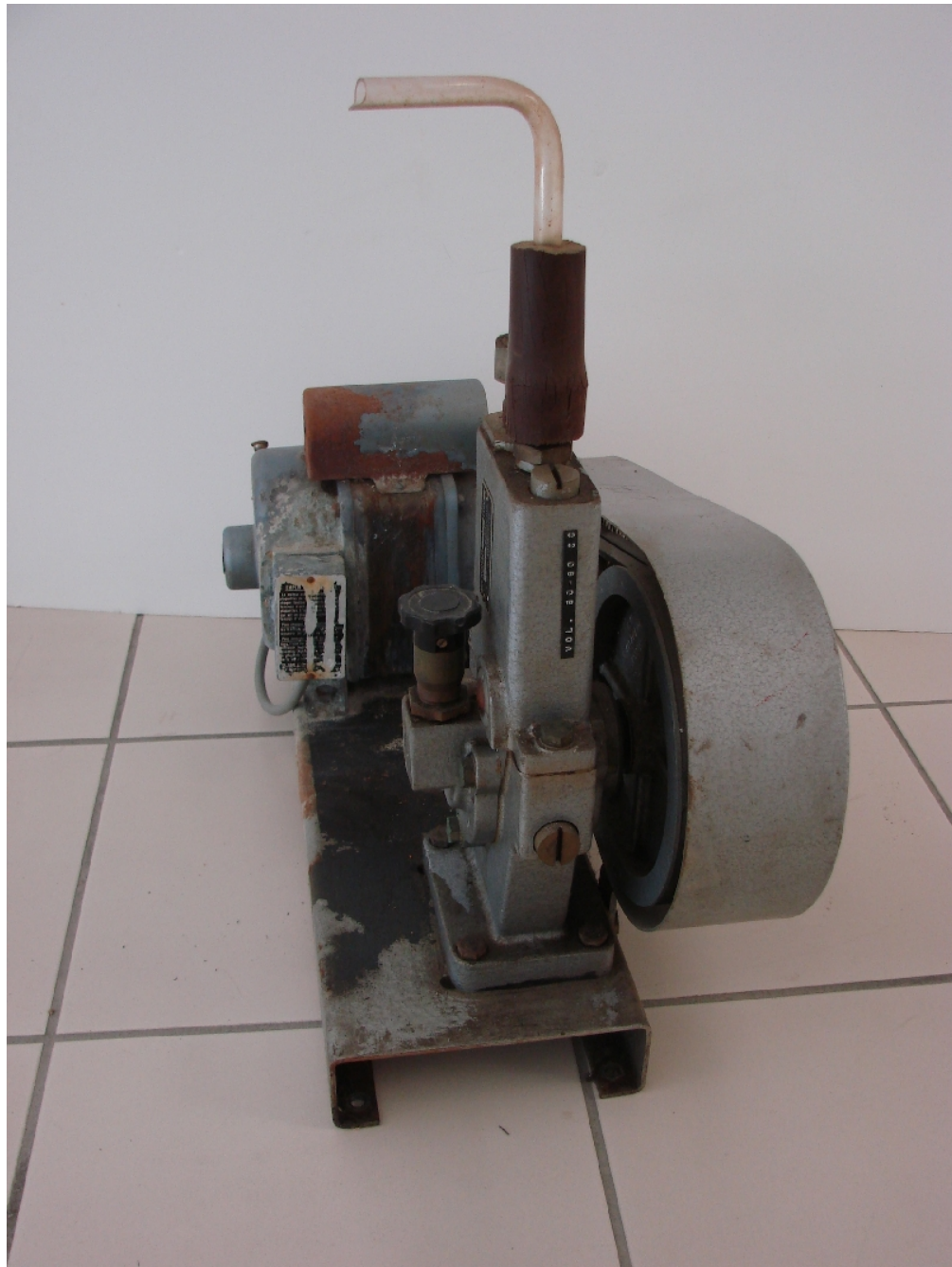


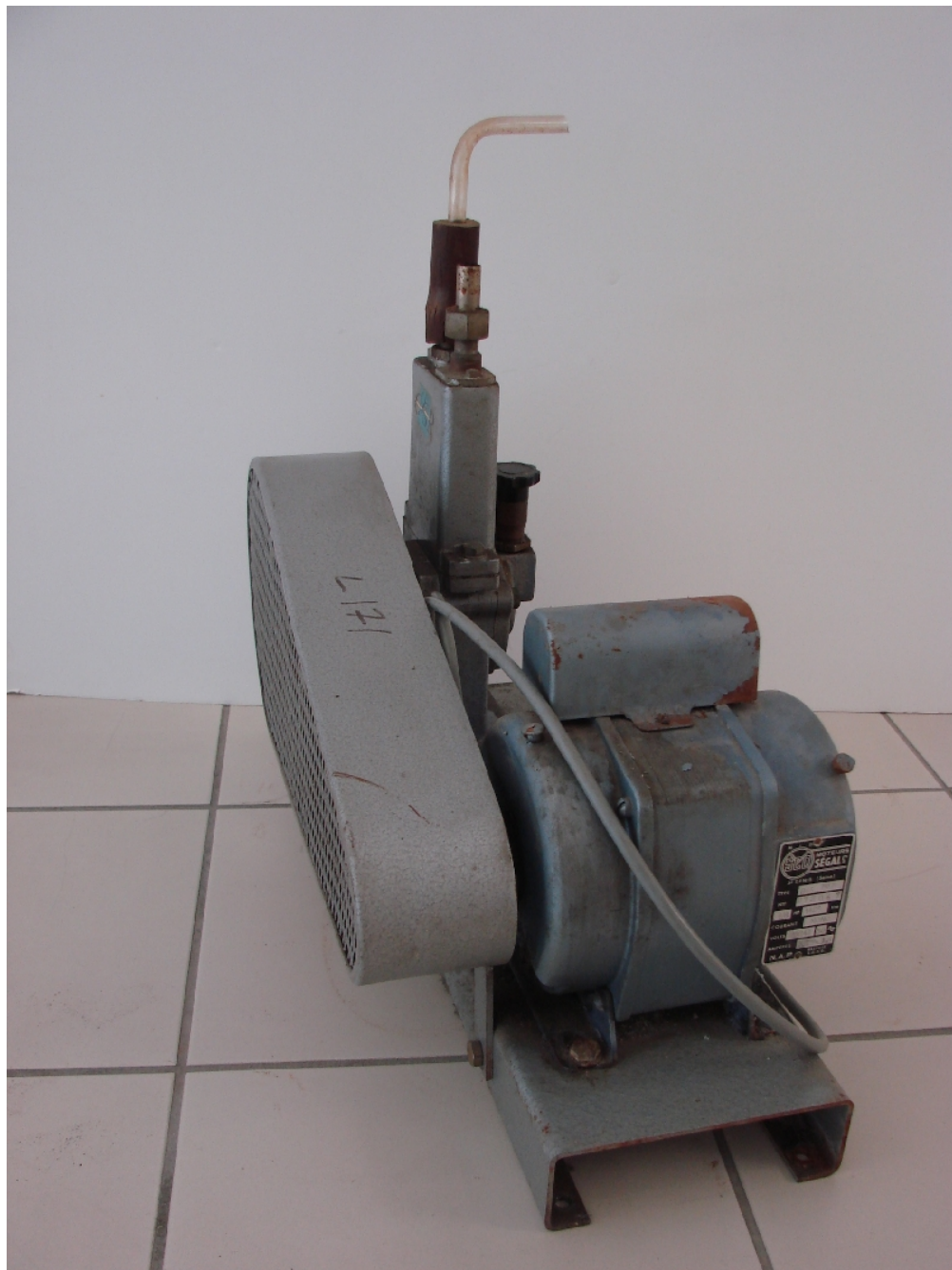





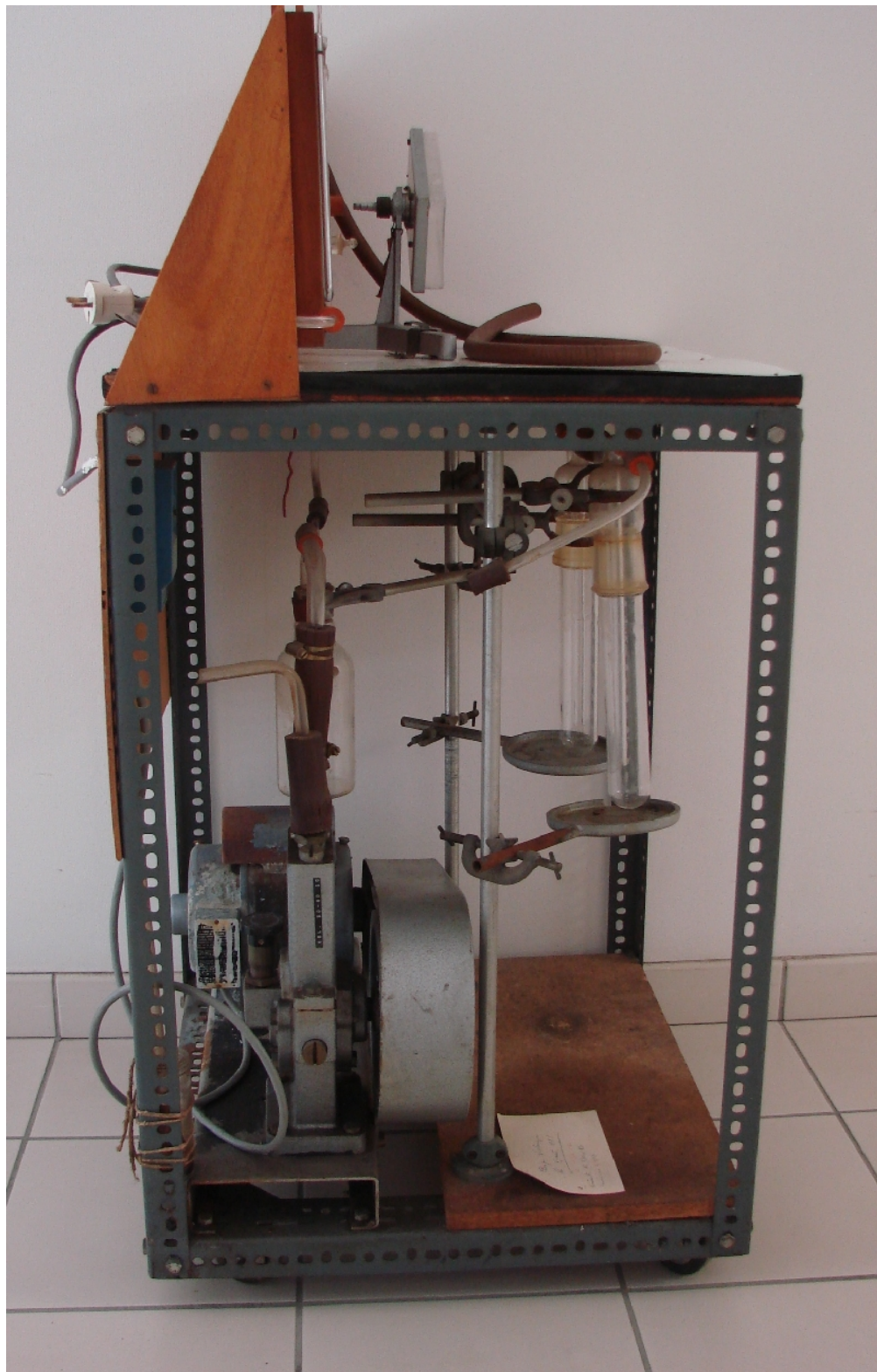

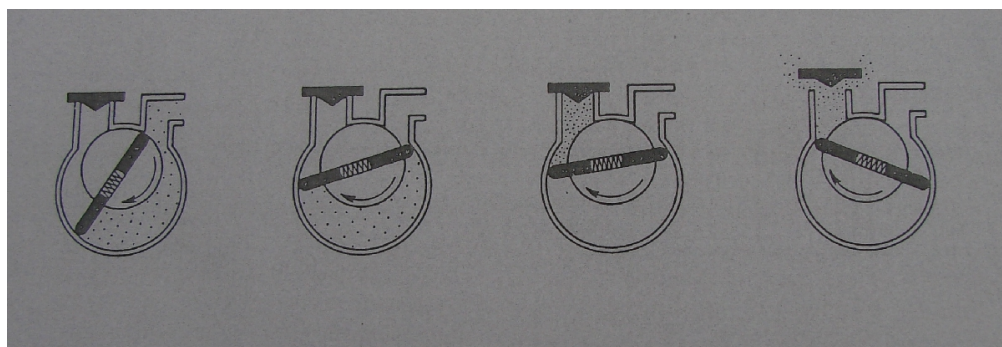

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pompe à vide à palettes (Compagnie Générale de radiologie), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4530>, consulté le 2026-07-24